

Olympia Care

08888 Patul de îngrijire Olympia: bine încercat, durabil și sigur. Datorită mai multor tipuri de panouri de pat, unei game extinse de culori și posibilității de a ascunde roțile de la vedere, patul vă permite să dați o notă personală încăperii.

Cadrul inferior

- Ajustare stabilă a înălțimii prin intermediul unui sistem cu brațe de susținere.
- Ajustare Trendelenburg (*) și Trendelenburg invers până la $\pm 17^\circ$.
- Roți de design Ø 125 mm de înaltă calitate, cu frâne individuale.
- Roți Integral S Ø 125 sau 150 mm de înaltă calitate, cu frână centrală (*).
- Pedală pentru activarea mecanismului central de frânare (*).
- Roțile ascunse (Ø 50 mm) cu frână centrală sunt dispuse cu capace sintetice (*).
- Cadrul nu are motoare, ceea ce îi facilitează accesibilitatea și posibilitatea de curățare.

Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 3 sau 4 (*) secțiuni.
- Spătarul este ajustabil electric până la $\pm 70^\circ$ cu autoregresie.
- Secțiunea genunchi este ajustabilă electric până la $\pm 34^\circ$ (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea picioare este ajustabilă manual pentru poziția Fowler (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea gambe este ajustabilă manual până la $\pm 14^\circ$ (la versiunea cu 3 secțiuni).
- Manipulările electrice ale secțiunilor platformei saltea sunt echipate cu o clemă de siguranță.
- Platformă saltea cu profile rotunjite de oțel.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Extensie telescopică a patului de până la +20 cm (nu este posibil cu protecții laterale Pollux).
- Cele 2 colțuri de la cap sunt echipate cu suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
- Șuruburile de fixare nu sunt vizibile la panouri.
- Panourile de pat sunt realizate din fag uscat (*).
- Colțuri rotunjite pentru a crește siguranța pasivă.

Funcții electrice

- Funcțiile electrice sunt activate prin intermediul telecomenzii sau a *mini-panoului de comandă* (*).
- Următoarele funcții sunt posibile prin intermediul unor combinații de taste de pe telecomandă:
 - Trendelenburg
 - Blocare / deblocare totală (după 3 sec.)
 - CPR
 - Înălțime de transport ajustabilă personal
- Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit preprogramată și buton pentru lumina de sub pat (*).
- *Mini-panoul de comandă asistentă* (*) permite blocarea selectivă a mai multor funcții electrice.
- Panoul de blocare (*) blochează toate funcțiile electrice ale telecomenzii printr-un singur buton.
- Telecomanda opțională (*) permite blocarea selectivă a funcțiilor electrice printr-o cheie magnetică.

Tipuri de panouri

- Midea (standard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)

Protecții laterale

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphere (*)
- Twin (*)


Accesorii

Referință la lista de accesorii.



Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 100,5 cm, Lungime: 208 cm
- Variația înălțimii platformei saltea:
 - $\pm 35,5^*$ cm - $\pm 78,5$ cm (cu roți Ø 125 mm)
 - $\pm 34,5^*$ cm - $\pm 77,5$ cm (cu roți ascunse)
- Garda la sol a cadrului inferior:
 - L: 170 mm, R: 135 mm (cu roți Ø 125 mm)
 - L: 160 mm, R: 125 mm (cu roți ascunse)
- Sarcina de lucru sigură: 250 kg
- Greutate (fără opțiuni): 125 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
- Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm
- (*) cu Trendelenburg + 2,5 cm

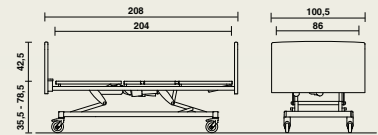

Materiale și finisaje

- Lemn: fag (masiv, furnir), PAL (melaminat).
- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 *aluminiu alb*.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de **culori**.

Opționale

- Platformă saltea cu 4 secțiuni.
- Platformă saltea cu secțiuni detașabile din laminat solid.
- Extensie platformă saltea până la +20 cm.
- Tipuri de panouri: Puro, Felina sau Valentino.
- Bumpere de protecție și/sau distanțier de perete.
- Protecții laterale.
- Panou blocare (ACL) sau mini-panou comandă (ACC).
- Telecomandă cu blocare selectivă (incl. Trend.)
- Telecomandă iluminată și/sau lumina de sub pat.
- Înelși de lemn la cadrul inferior și/sau cadrul platformei saltea.
- Cârlige pentru accesorii.
- Baterie.
- Eliberare rapidă manuală a spătarului (CPR).
- Suport pentru pătură.
- Alarmă de frână (numai cu frâna centrală).

(*) Opțional

